

# REAL TEST DE GRAHAM SAFE & CLEAN

## REAL GRAHAM TEST SAFE & CLEAN

**Portaobjetos listos para usar para la detección de *Enterobius vermicularis***  
***Ready-to-use glassslides for the detection of *Enterobius vermicularis****


|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| RPTGSF  | REAL TEST DE GRAHAM SAFE & CLEAN |
| RPTGSF1 | REAL TEST DE GRAHAM SAFE & CLEAN |
| RPTGSFM | REAL TEST DE GRAHAM SAFE & CLEAN |

|                                        |
|----------------------------------------|
| 60 cajas/boxes x 3 portaobjetos/slides |
| 50 cajas/boxes x 1 portaobjetos/slides |
| 10 cajas/boxes x 3 portaobjetos/slides |

**Estado regulatorio:**  
**Regulatory status:**



Producto sanitario para diagnóstico in vitro.  
*In vitro diagnostic medical device with CE marking.*

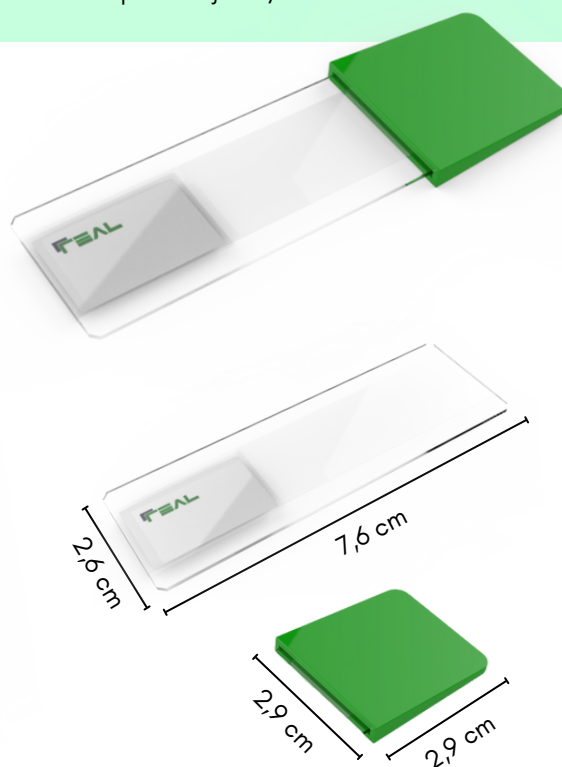

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El REAL Test de Graham Safe & Clean es la mejor solución para la detección de *Enterobius vermicularis*, está constituido por un portaobjetos con cinta adhesiva listo para usar que permite una recogida fácil y eficiente. Fabricado con el vidrio de la máxima calidad para garantizar una visualización óptima.

Este dispositivo incluye, además, nuestro revolucionario capuchón de plástico flexible que facilita la recolección, a la vez que evita el contacto directo entre la piel del paciente y el vidrio, previniendo cortes y arañazos, así como también disminuye la probabilidad de infección accidental durante la recogida de la muestra.

### 1. PRODUCT DESCRIPTION

The Graham Safe & Clean REAL Test is the best solution for detecting *Enterobius vermicularis*. It consists of a ready-to-use adhesive tape slide that allows for easy and efficient collection. Manufactured with the highest quality glass to ensure optimal visualisation.

This device also includes our revolutionary flexible plastic cap, which facilitates collection while preventing direct contact between the patient's skin and the glass, thus avoiding cuts and scratches and reducing the likelihood of accidental infection during sample collection.

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Incorpora una pestaña para la fácil manipulación del adhesivo.
- Superficie de visualización completa (sin zonas mate).
- Dimensiones del portaobjetos: 76 x 26 x 1 mm.
- Esquinas esmeriladas a 45 °.
- Acondicionamiento en caja de plástico para prevenir roturas.

## 2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Includes a tab for easy handling of the adhesive.
- Full display surface (no matt areas).
- Dimensions of the slide: 76 x 26 x 1 mm.
- Corners bevelled at 45°.
- Packaging in a plastic box to prevent breakage.

## 2. ALMACENAMIENTO Y DESECHO

- Conservar a temperatura ambiente.
- Utilizar antes de la fecha de caducidad indicada en el etiquetado.
- Desechar siguiendo métodos específicos para la destrucción de material con contenido biológico.

## 2. STORAGE AND DISPOSAL

- Store at room temperature.
- Use before the expiry date indicated on the label.
- Dispose of according to specific methods for the destruction of material containing biological content.

## 3. PRECAUCIONES

- Todas las muestras deben ser tratadas como una fuente potencial de infección.
- Antes de la toma de muestra comprobar que el cristal no tiene grietas ni roturas y no utilizar si está dañado.
- Manipular el vidrio cuidadosamente para evitar roturas.
- Para evitar contagios, manipular cuidadosamente y lavarse las manos tras la recogida.

## 3. PRECAUTIONS

- All samples must be treated as a potential source of infection.
- Before taking the sample, check that the glass is not cracked or broken and do not use it if it is damaged.
- Handle the glass carefully to avoid breakage.
- To avoid infection, handle with care and wash your hands after collection.

